



Bellman & Symfon®

Bellman Visit Charger model 1260

(NL)



De Bellman Visit lader is onderdeel van een signaleringssysteem ook wel welk en waarschuwingssysteem genoemd. De trilontvanger wordt hierin opgeladen. Er kunnen twee trilkussens op worden aangesloten.

Ingebruikname

1. Plaats de lader op tafel (met bijgeleverde steunvoetjes) of schroef hem aan de muur.
2. Sluit de adapter en de trilschijf aan.
3. Plaats de trilontvanger in de lader. Bij volgeladen batterij (zie laadlampje) is hij klaar voor gebruik.

Laadlampje

Als de trilontvanger in de lader wordt geplaatst, zal het laadlampje groen branden. De batterij wordt opgeladen en de trilontvanger is correct geplaatst. Het laadlampje brandt niet als de batterij vol is of de trilontvanger niet in de lader is geplaatst.

Back-up batterij

Is ingebouwd in de lader en zorgt bij stroomuitval, dat de trilschijven toch functioneren bij alarm

Trikussen

Maximaal twee trilschijven kunnen worden aangesloten op resp. uitgang A en B.

Storingen

Ondanks het feit dat het Bellman Visit systeem veilig en betrouwbaar is kunnen er toch eventuele storingen optreden. Wanneer deze zich voordoen probeert u eens onderstaand tabel. Bij meer gecompliceerde storingen neemt u contact op met de dealer.


Storing	Handeling
De trilontvanger wordt niet opgeladen als hij in de lader geplaatst is.	Zorg dat de trilontvanger correct geplaatst is in de lader (het lampje brandt groen).
De trilontvanger functioneert niet als de zender geactiveerd wordt.	Zorg dat het trilschijven goed aangesloten is en dat de trilontvanger correct geplaatst is in de lader.

Beschrijving lader

- 1) Uitgang A
- 2) Laadcontacten
- 3) Laadlampje
- 4) Uitgang B
- 5) Steunvoetjes

Attentie!

De lader funtioneert alleen als er een oplaadbare batterij geplaatst is.

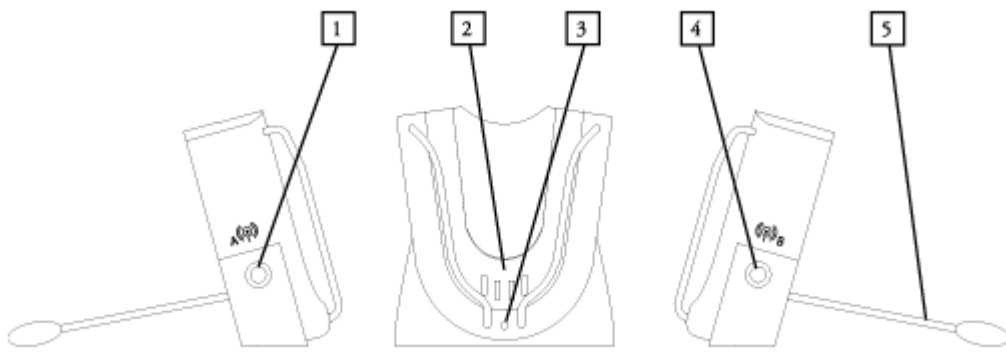

Address:
Bellman & Symfon AB
Södra Långebergsgatan 30,
421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA
Sweden

Our office hours are:
Mon-Fri 08:00-12:00, 12:45-16:30

Telephone: +46 31 682820
Fax: +46 31 682890
Homepage: www.bellman.com
Sending us company e-mail: info@bellman.symfon.se