

GEEMARC

CLEAR SOUND™

HEAR THE DIFFERENCE

CL455

Versterkte telefoon met grote knoppen en antwoordapparaat



Nederlands

INHOUD

INHOUD	1
INLEIDING	3
De telefoon uitpakken	4
OMSCHRIJVING	5
Algemene omschrijving	5
Beschrijving van de toetsen	7
LCD Omschrijving	9
Menunavigatie	10
INSTALLATIE	12
Opstelling	12
Monteren op de muur	13
Taal instellen	14
Contrast instellen	14
Nachtlampje	15
Lettergrootte instellen	15
Het uur formatteren	15
De datum formatteren	16
Instelling van de belsegnaal	16
Instelling van de aankondiging van een binnenkomende oproep	18
Belsegnaal voor een belangrijk persoon (VIP) instellen	18
Instelling van de tonen van het toetsenbord	19
Oproep in de wachtstand	19
FLASH-tijd instellen	20
Draaimodus instellen	21
Datum en Tijd instellen	21
Instelling van de nummeraankondiging	22
Instelling van de Beller's ID aankondiging	23
Telefoonboek en Beller's ID lijst bekijken	23
Aansporing voor opnames	24
Instellingen van het ontvangstvolume en de toon	25
DE TELEFOON GEBRUIKEN	27
Iemand bellen	27
Laatste nummer opnieuw bellen	28
Een nummer bellen uit de lijst van de laatst gedraaide nummers	28
De lijst van de laatst gedraaide nummers wissen	28
Stilmodus (Mute) functie	28
Wachtstand functie	29

INHOUD

Een gesprek aannemen.....	29
Gebruik van gehoorapparaten	29
Flash signaal.....	29
OPTIONELE ACCESSOIRES.....	30
Schudapparaat.....	30
Gebruik van de koptelefoon en halslus	30
BELLER'S ID	31
De Beller's ID lijst bekijken	31
Een nummer bellen uit de Beller's ID lijst	31
Een Nummer uit de Beller's ID lijst toevoegen aan het Telefoonboek	32
Een nummer uit de Beller's ID lijst wissen.....	32
Alle nummers uit de Beller's ID lijst wissen	33
Beller's ID in geval van een oproep in de wachtstand.....	33
TELEFOONBOEK.....	34
M.b.v. het Menu een Registratie in het Telefoonboek maken	34
Een registratie in het telefoonboek maken vanuit de stand-by stand.....	35
Een registratie in het telefoonboek bekijken.....	36
Een registratie in het telefoonboek bellen	37
Een registratie in het telefoonboek wijzigen	37
Een registratie in het telefoonboek wissen	38
Een registratie met stemgeluid aankondigen	38
Een registratie met aankondiging via stemgeluid opnemen.....	39
Een registratie met aankondiging via stemgeluid wissen.....	39
SNELDRAAIEN.....	41
Een sneldraainummer maken.....	41
Een sneldraainummer bekijken/bellen.....	41
Een sneldraainummer wissen.....	41
ANTWOORDAPPARAAT	42
Het antwoordapparaat aan- of uitzetten	42
Uitgaande mededeling	43
Een uitgaande mededeling opnemen.....	43
Een uitgaande mededeling controleren.....	44
De uitgaande mededeling herstellen	44
Instellingen van het Antwoordapparaat	45
Naar berichten luisteren.....	46
Screening van oproepen.....	47

INHOUD

Langzaam afluisteren van een binnenkomend bericht	47
Het antwoordapparaat op afstand in werking stellen.....	48
Code op afstand.....	48
Afstandsbediening	49
Commando's voor op afstand bediening	49
Een memo opnemen	49
Geheugen is vol	50
FOUTOPSPORING	51
VEILIGHEIDSINFORMATIE.....	52
ALGEMENE INFORMATIE	53
RECYCLE RICHTLIJNEN.....	54

INLEIDING

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Geemarc CL455. Dit is een multifunctionele telefoon. Het biedt handenvrij gebruik, beller's ID*, aankondiging van de beller of een gedraaid nummer, een telefoonboek, sneldraaien en een antwoordapparaat. Het levert ook versterking wat handig is voor hardhorende mensen. Het apparaat heeft grote knoppen en een gemakkelijk te zien en te gebruiken toetsenbord om foutief draaien te voorkomen. Deze telefoon is compatibel met gehoorapparaten.

Om de mogelijkheden van uw Geemarc telefoon volledig te benutten, is het van belang dat u eerst de onderstaande instructies leest. Bewaar deze gebruikshandleiding voor toekomstige raadpleging op een veilige plek.

Deze handleiding legt u uit hoe u de telefoon moet gebruiken.

CL455



* Om de beller's display te gebruiken moet u zich op beller's display bij uw dienstverlener van telefoonverkeer registreren.

De telefoon uitpakken

Wanneer u de telefoon uitpakt, moet u het volgende vinden in de verpakking:


- 1 CL455 eenheid
- 1 CL455 handset met gedraaid koord
- 1 Telefoon aansluitsnoer
- 1 adapter voor de netvoeding
- 1 Gebruikshandleiding








Bezoek ons op www.geemarc.com voor productondersteuning en hulp
telefoon 03.28.58.75.99
of fax 03.28.58.75.76

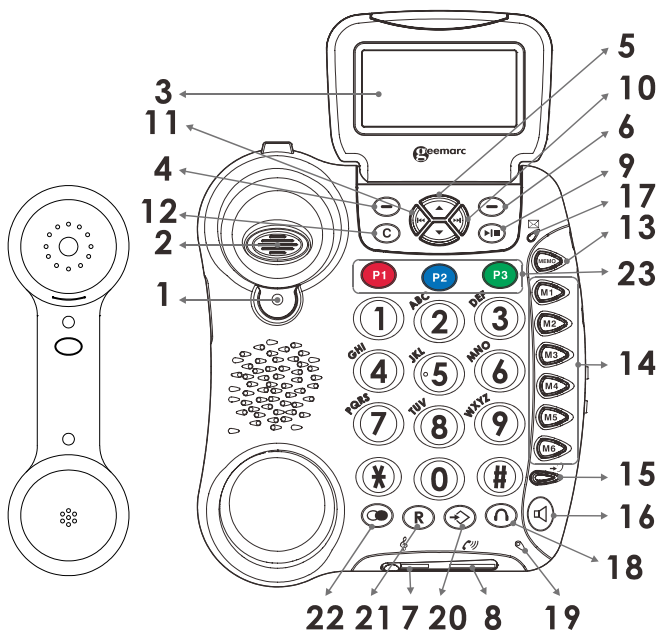OMSCHRIJVING



Algemene omschrijving



1. Ophanglipje van de handset
2. Schakelaar voor de telefoonhaak
3. Groot LCD beeldscherm
4. Linker 'softkey'
5. Naar boven/beneden scrollen
6. Rechter 'softkey'
7. Aanpassing van de ontvangsttoon
8. Aanpassing van de ontvangstvolume
9. Afspelen/stop
10. Volgende
11. Vorige
12. DEL (= wissen) toets (C)

13. MEMO
14. Toetsen voor sneldraaien (M1-M6)
15. Extra versterkingstoets/indicator 
16. Luidsprekertoets 
17. LED voor bericht in de wachtstand/nieuwe oproep
18. Toets v/d koptelefoon 
19. Microfoon
20. Opslagtoets 
21. R toets
22. Toets voor herhaald draaien 
23. Toetsen voor sneldraaien naar nummers voor noodgevallen (P1-P3)



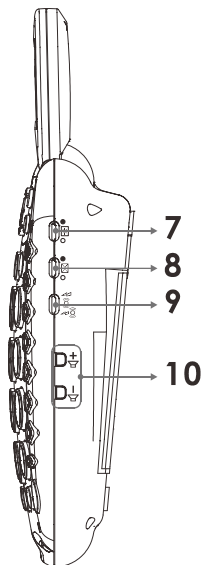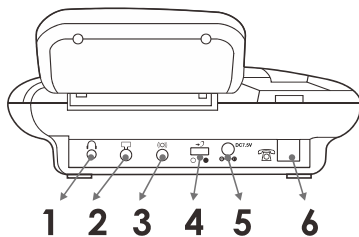


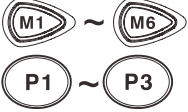







OMSCHRIJVING





1. Stekerbus voor de koptelefoon
2. Stekerbus voor de audio halslus
3. Stekerbus voor de bedtriller (optioneel)
Tijdelijke ophefschakelaar voor het volumeherstel (AAN/UIT)
5. Stekerbus voor de voeding
6. Stekerbus voor het telefoon aansluitsnoer
7. Schakelaar voor de achtergrondverlichting
8. Schakelaar voor de indicator van een nieuwe oproep
9. Keuzeschakelaar tussen triller, stroboscoop en stroboscoop & triller
10. Volumeregelaars

OMSCHRIJVING

Beschrijving van de toetsen

	Een oproep/gesprek beginnen/beantwoorden/beëindigen. Schakelt de luidspreker in wanneer deze ingedrukt wordt tijdens een gesprek.
	Laatste nummer opnieuw bellen Een pauze inlassen wanneer u een nummer vooraf programmeert.
	Scrol door de menuopties. Toegang tot de lijst van beller's IDs
	'Softkeys': Deze voeren de functies uit die er direct boven (op de onderste regel in het beeldscherm) staan en die afhankelijk van de context wisselen.
	Druk op deze knop om de extra versterking AAN of UIT te zetten.
	De negen toetsen worden gebruikt om snel te draaien ('één-aanslag' toetsen).
	Deze toets wordt gebruikt om nummers op te slaan.
	Deze knop wordt gebruikt om een gesprek te beëindigen en opnieuw een kiestoon te krijgen of om over te schakelen naar een andere beller op voorwaarde dat u op deze dienst bent geabonneerd (bijv. gesprek in de wachtstand).
	Druk op deze toets om het afspelende Bericht of Memo te starten of te stoppen.
	Druk op deze toets om het volgende bericht af te spelen.
	Druk eenmaal op deze toets om het huidige bericht af te spelen. Druk tweemaal op deze toets om het vorige bericht af te spelen.
	Druk op deze toets om het huidige bericht te wissen terwijl het afspeelt.
	Druk op deze toets om een Memo op te nemen.


OMSCHRIJVING

 VOL-	 VOL+	Gebruik deze toetsen om het belvolume, luidspreker voor handenvrij bellen en de aankondiging van een gedraaid nummer of een beller aan te passen.
---	---	---


OMSCHRIJVING

LCD Omschrijving


In de stand-by stand zal het grote LCD beeldscherm het volgende tonen:

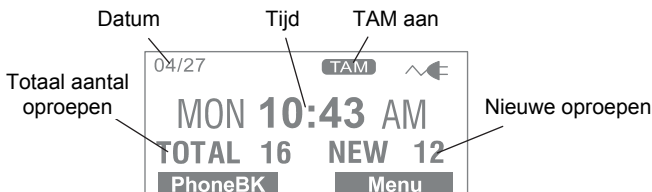

Als u vergeten hebt het aansluitsnoer van de telefoon te verbinden, zal het beeldscherm 'No line' (= **Geen aansluiting**) laten zien.

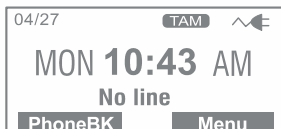


Als u op de **Menu** 'softkey' drukt, zal het hoofdmenu getoond worden. Gebruik ? of ? om door het menu te scrollen totdat u de gewenste optie vindt. Druk op de **Kiezen** 'softkey' om dit te bevestigen.

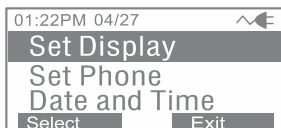

Als er een oproep binnenkomt, zal het telefoonnummer en/of de naam van de beller getoond worden (op voorwaarde dat u geabonneerd bent op de Beller's ID service bij uw dienstverlener voor netwerkdiensten).




Het beeldscherm hieronder toont het totaal aantal oproepen en de nieuwe oproepen die bekeken moeten worden. Dit voorbeeld toont dat u een totaal van 16 oproepen inclusief 12 nieuwe oproepen. _

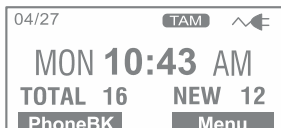

Het beeldscherm hieronder toont dat u 2 nieuwe berichten op uw antwoordapparaat heeft.

OMSCHRIJVING

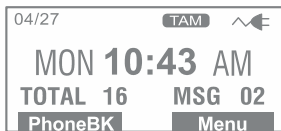


Als u geabonneerd bent op de Beller's ID service: Als de beller de keuze heeft gemaakt om zijn/haar naam en nummer NIET te versturen, zal het beeldscherm **Private** (= **Privé**) laten zien.

Als u geabonneerd bent op de Beller's ID service: **Buiten gebied** zal getoond worden als iemand belt uit een gebied waar de telefoonmaatschappij geen Beller's ID diensten aanbiedt of geen doorlevering van nummers aan uw gebied heeft.

Menunavigatie

U moet de volgende stappen doorlopen om toegang te krijgen tot willekeurig welke menufunctie:

- 1) Druk op de **Menu** 'softkey' en het hoofdmenu zal getoond worden.
- 2) Gebruik ▲ of ▼ om door het menu te scrollen totdat u de gewenste optie vindt.
- 3) Druk op de **Kiezen** 'softkey' om dit te bevestigen.

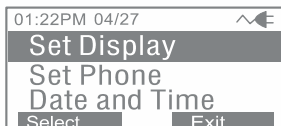

U moet de volgende stap doorlopen om willekeurig welk menu te verlaten:

- 1) Druk op de **BACK** (= **Terug**) of **EXIT** (= **afsluiten**) 'softkey' en u zult terugkeren naar het vorige menu.

Menuoverzicht

Beeldscherm instellen	
	Taal instellen
	Contrast instellen
	DIM:X-→x
	Het uur formatteren
	De datum formatteren
Telefoon instellen	
	Belsignaal instellen
	Oproep in de wachtstand
	FLASH instellen

OMSCHRIJVING

	Draaimodus
Datum en Tijd	
Aankondigingen instellen	
	Aankondiging van een gedraaid nummer
	Aankondiging van een beller
	Afspelen van berichten/memo's
	Aansporing voor opnames
TAM instellen	
	TAM AAN/UIT
	Uitgaand bericht
	Gebeld nummer
	Beveiliging ID
	ICM stem langzaam

Opstelling

Verbind een uiteinde van het gedraaide koord met de handset. Steek het andere uiteinde van het gedraaide koord in de stekerbuis aan de linkerkant van het CL455 telefoon. Leg de handset op het basisstation.

Steek de telefoonkabel in het contact aan de achterkant van de telefoon en steek daarna de stekker in het wandcontact voor de telefoon (**).

U moet de voedingsadapter verbinden voordat de LCD display, de achtergrondverlichting en andere speciale functies zullen werken. Verbind de voedingsadapter met de stekerbuis die zich aan de achterkant van de telefoon bevindt en steek daarna het andere uiteinde in een 13Amp wandcontactdoos (*). Kies bij voorkeur een wandcontactdoos vlakbij uw telefoon zodat u bij problemen de netvoeding er snel uit kunt halen.

(*) Geclassificeerd als 'gevaarlijk voltage' volgens de EN60950 norm.

(**) TNV-3 classificatie volgens EN60950 norm


INSTALLATIE

Monteren op de muur


Schuif het ophanglipje van de handset eruit en draai het om (180° omdraaien – zie figuur 1). Dit voorkomt dat de handset uit het basisstation valt wanneer de telefoon op de muur is gemonteerd.

Monteer twee zelftappers (niet meegeleverd) in de muur op een afstand van 80 mm van elkaar in een verticale lijn.

Plaats het basisstation over de schroefkoppen en schuif deze naar beneden om het vast te zetten (zie figuur 2).

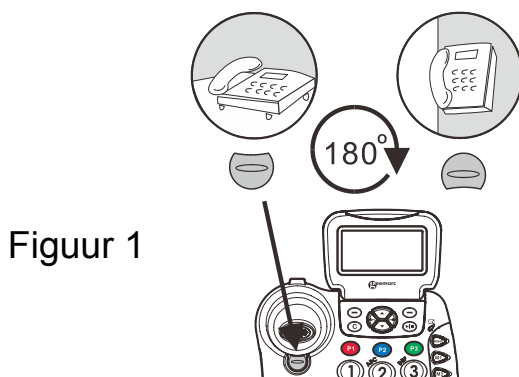

Figuur 1

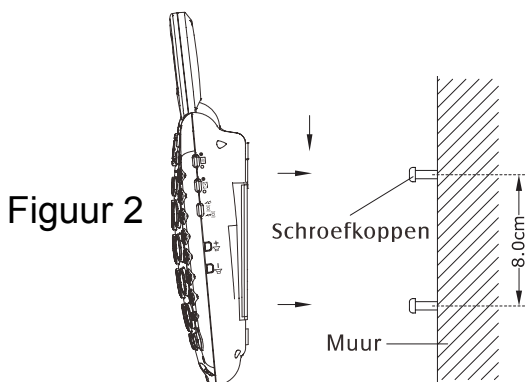

Figuur 2

INSTALLATIE

Taal instellen

Druk op de **'MENU'** 'softkey'.

Druk op de **'SELECT'** (= **Kiezen**) 'softkey' om toegang te krijgen tot **'SET DISPLAY'** (= **Beeldscherm instellen**).

Druk op de **'SELECT'** (= **Kiezen**) 'softkey' om toegang te krijgen tot **'LANGUAGE'** (= **Taal**).

Gebruik ▲ of ▼ om één van de beschikbare talen (Engels, Frans, Spaans of Duits) te kiezen.

Druk op de **'SELECT'** 'softkey' om te bevestigen.

Contrast instellen

Uw beeldscherm heeft achtergrondverlichting die automatisch uitgaat als het 15 seconden lang inactief is geweest. Het contrast van de tekst t.o.v. de achtergrondverlichting kan verhoogd of verlaagd worden.

Druk op de **'MENU'** 'softkey'.

Druk op de **'SELECT'** (= **Kiezen**) 'softkey' om toegang te krijgen tot **'SET DISPLAY'** (= **Beeldscherm instellen**).

Gebruik ▲ en ▼ om **'SET CONTRAST'** (= **Contrast instellen**) te kiezen.




Druk op de **'SELECT'** 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om 1 van de 8 beschikbare contrastniveau's te kiezen.

Druk op de **'SELECT'** 'softkey' om te bevestigen.

INSTALLATIE

Nachtlampje



Als u de LCD achtergrondverlichting als een nachtlampje wilt gebruiken, zet u de   schakelaar van de achtergrondverlichting op . Nu zal de achtergrondverlichting continue branden.

Lettergrootte instellen



De tekst op het beeldscherm kan in grote letters of in kleine letters weergegeven worden.

Druk op de '**MENU**' 'softkey'.

Druk op de '**SELECT**' (= **Kiezen**) 'softkey' om toegang te krijgen tot '**SET DISPLAY**' (= **Beeldscherm instellen**).

Gebruik  en  om '**DIM: X → x**' te kiezen.

Press '**SELECT**' soft key

Use  and  to select either '**ON**' (large) or '**OFF**' (small)

Press '**SELECT**' soft key to confirm

NB: Als de grote letters aanstaan terwijl u een nummer vooraf intoetst, zal de grootte automatisch naar een kleiner formaat overschakelen als het nummer de 8 cijfers overtreft.

Het uur formatteren

Druk op de '**MENU**' 'softkey'.

Druk op de '**SELECT**' (= **Kiezen**) 'softkey' om toegang te krijgen tot '**SET DISPLAY**' (= **Beeldscherm instellen**).

INSTALLATIE

Gebruik ▲ en ▼ om 'HOUR FORMAT' (= Uur formatteren) te kiezen.

Druk op de 'SELECT' 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om '12-uurs klok' of '24-uurs klok' te kiezen.

Druk op de 'SELECT' 'softkey' om te bevestigen.

NB: Als de 12-uurs klok gekozen is, zal in de stand-by stand AM of PM aan de rechterzijde van de tijd getoond worden.

De datum formatteren

Druk op de 'MENU' 'softkey'.

Druk op de 'SELECT' (= Kiezen) 'softkey' om toegang te krijgen tot 'SET DISPLAY' (= Beeldscherm instellen).

Gebruik ▲ en ▼ om 'DATE FORMAT' (= Datum formatteren) te kiezen.

Druk op de 'SELECT' 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om 'MM/DD' of 'DD/MM' te kiezen.

Druk op de 'SELECT' 'softkey' om te bevestigen.

Instelling van de belsignaal

U kunt uw eigen belsignaal kiezen en u kunt ook het dag- en nachtvolume aanpassen. Ook kunt u het volume uitzetten om zodoende de belsignaal uit te schakelen.

Druk op de 'MENU' 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om 'SET PHONE' (= Telefoon

INSTALLATIE

instellen) te kiezen.

Druk op de **'SELECT'** 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om **'SET RING'** (= **Belsignaal instellen**) te kiezen en druk daarna op **'SELECT'**.

'DAY VOLUME' zal op het beeldscherm getoond worden (6:00 - 22:00).

Druk op de **'CHANGE'** (= **Verander**) 'softkey' om het gewenste dagvolume voor het belsignaal te kiezen. Ieder keer dat u de **'CHANGE'** 'softkey' indrukt, zal **'LOW'** (=Laag), **'MEDIUM'** (= Medium), **'HIGH'** (= Hoog) of **'OFF'** (= Uit) getoond worden en de telefoon zal op het gekozen volumenniveau overgaan.

Gebruik ▼ om **'NIGHT VOLUME'** te kiezen (22:00 - 6:00).

Gebruik de hierboven beschreven instelling van het volume om het gewenste nachtvolume voor het belsignaal te kiezen.

Gebruik ▼ om **'RING TONE'** (= **Beltoon**) te kiezen.

Druk op de **'CHANGE'** 'softkey' om de gewenste beltoon te kiezen. Iedere keer dat u de **'CHANGE'** 'softkey' indrukt, zal de telefoon met de gekozen beltoon overgaan.

Druk op de **'SAVE'** (= **Bewaar**) 'softkey' om te bevestigen.

In de stand-by stand kunt u ook het belvolume aanpassen. Gebruik daartoe de VOL+ en VOL- volumeregelaars die zich aan de rechterkant van de telefoon bevinden. Het beeldscherm toont het ingestelde niveau, bijvoorbeeld **'RINGER LOW'** (= Laag belniveau).

INSTALLATIE

Instelling van de aankondiging van een binnenkomende oproep

Aan de rechterkant van de telefoon bevindt zich een schakelaar om triller, stroboscoop en stroboscoop & triller te kiezen. Dit stelt u in staat om de manier waarop u van een binnenkomende oproep gewaarschuwd wordt te kiezen. U heeft de keuze uit het afstelbare belsignaal, de heldere stroboscoop die oplicht bij ontvangst van een oproep en tenslotte de triller in uw bed. U kunt één van de opties of een combinatie ervan kiezen. Als u de bedtriller gekocht heeft, steekt u deze in de stekkerbus voor de triller en legt u de triller tussen de springveer en uw matras.

Belsignaal voor een belangrijk persoon (VIP) instellen

Elk contact, dat in het telefoonboek bewaard is, zal automatisch de bij hun gegevens behorende VIP beltoon laten horen.

Druk op de '**MENU**' 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om '**SET PHONE**' (= **Telefoon instellen**) te kiezen.

Druk op de '**SELECT**' (=Kiezen) 'softkey'.

Druk op de '**SELECT**' 'softkey' om toegang te krijgen tot '**SET RING**' (= **Belsignaal instellen**).

Gebruik ▲ en ▼ om '**VIP TONE**' (= **VIP Toon**) te kiezen.

Druk op de '**CHANGE**' 'softkey' om de gewenste beltoon te kiezen. Iedere keer dat u de '**CHANGE**' 'softkey' indrukt, zal de telefoon met de gekozen beltoon overgaan

Druk op de '**SAVE**' (= **Bewaar**) 'softkey' om te bevestigen.

INSTALLATIE

Instelling van de tonen van het toetsenbord

Druk op de '**MENU**' 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om '**SET PHONE**' (= **Telefoon instellen**) te kiezen.

Druk op de '**SELECT**' (= **Kiezen**) 'softkey'.

Druk op de '**SELECT**' 'softkey' om toegang te krijgen tot '**SET RING**' (= **Belsignaal instellen**).

Gebruik ▲ en ▼ om '**KEYPAD TONES**' (= **Toetsenbord tonen**) te kiezen.

Druk op de '**CHANGE**' 'softkey' om de gewenste tonen van het toetsenbord te kiezen. U heeft de keuze uit '**ON**' (= **Aan**), '**OFF**' (= **Uit**) of '**Link to Ringer**' (= **Geassocieerd met belsignaal**).

Druk op de '**SAVE**' (= **Bewaar**) 'softkey' om te bevestigen.

NB: 'Geassocieerd met belsignaal' wil zeggen dat de tonen van het toetsenbord op hetzelfde volume als het volume van het belsignaal gehoord worden. Elke verandering in het volume van het belsignaal zal automatisch het volume van het toetsenbord veranderen.

Oproep in de wachtstand

Als u geabonneerd bent op Oproep in de Wachtstand bij uw dienstverlener, moet u de functie van Oproep in de Wachtstand op uw telefoon activeren. De telefoon zal de naam en het nummer (indien de naam en het nummer in het telefoonboek zijn opgeslagen) van de tweede beller tonen terwijl u een gesprek voert.

Druk op de '**MENU**' 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om '**SET PHONE**' (= **Telefoon instellen**) te kiezen.

INSTALLATIE

Druk op de '**SELECT**' 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om '**CALL WAITING**' (= Oproep in de wachtstand) te kiezen.

Druk op de '**SELECT**' 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om '**ON**' (= Aan) of '**OFF**' (= Uit) te kiezen om zodoende de functie van Oproep in de Wachtstand te activeren.

Druk op de '**SELECT**' 'softkey' om te bevestigen.

FLASH-tijd instellen

U kunt de ingestelde FLASH tijd veranderen. U heeft vier mogelijkheden. Uw telefoon is ingesteld op de FLASH tijd voor GB (R=100ms).

Druk op de '**MENU**' 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om '**SET PHONE**' (= Telefoon instellen) te kiezen.

Druk op de '**SELECT**' 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om '**SET FLASH**' (= FLASH instellen) te kiezen.

Druk op de '**SELECT**' 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om '**100ms**', '**110ms**', '**300ms**' of '**600ms**' te kiezen.

Druk op de '**SELECT**' 'softkey' om te bevestigen.

INSTALLATIE

Draaimodus instellen

Tegenwoordig gebruiken alle telefooncentrales Toon bellen. Als uw telefoon niet naar buiten kan bellen, maakt het waarschijnlijk gebruik van een verouderde telefooncentrale (PBX). In dat geval moet de Toon/Puls instelling naar Puls veranderd worden.

Druk op de **'MENU'** 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om **'SET PHONE'** (= **Telefoon instellen**) te kiezen.

Druk op de **'SELECT'** 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om **'DIALLING MODE'** (= **Draaimodus**) te kiezen.

Druk op de **'SELECT'** 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om **'TOON'** of **'PULS'** te kiezen.

Druk op de **'SELECT'** 'softkey' om te bevestigen.

Datum en Tijd instellen

De telefoon zal in de stand-by stand de huidige datum en tijd tonen. U moet de datum en tijd instellen zodat deze in de gesprekslijst zullen verschijnen met de juiste datum en tijd als u een oproep ontvangt. Als u zich abonneert op een dienst van Beller's IDs zal de tijd en datum automatisch ingesteld worden wanneer de eerste oproep binnenkomt.

Druk op de **'MENU'** 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om **'DATE AND TIME'** (= **Datum en Tijd**) te kiezen.

Druk op de **'SELECT'** 'softkey'.

Voer de juiste tijd m.b.v. het numerieke toetsenbord in.

INSTALLATIE

Druk op de '**SAVE**' (= **Bewaren**) 'softkey'.

Voer de juiste datum m.b.v. het numerieke toetsenbord in.

Druk op de '**SAVE**' (= **Bewaren**) 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om de juiste dag van de week, bijv. MON (= maandag) of TUES (= dinsdag), etc., te kiezen.

Druk op de '**SAVE**' (= **Bewaren**) 'softkey'.

Instelling van de nummeraankondiging

Deze functie stelt u in staat om het in de stand-by stand ingevoerde nummer te controleren zonder een blik te werpen op het beeldscherm, met andere woorden, het nummer wordt aangekondigd wanneer het ingedrukt wordt.

Druk op de '**MENU**' 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om '**SET TALK**' (= **Aankondiging instellen**) te kiezen.

Druk op de '**SELECT**' 'softkey'.

Druk op de '**SELECT**' (= **Kiezen**) 'softkey' om toegang te krijgen tot '**DIALLING TALKING**' (= **Nummeraankondiging**).

Gebruik ▲ en ▼ om '**ON**' (= **Aan**) of '**OFF**' (= **Uit**) te kiezen om zodoende deze functie te activeren/deactiveren.

Druk op de '**SELECT**' 'softkey' om te bevestigen.

INSTALLATIE

Instelling van de Beller's ID aankondiging

Deze functie stelt u in staat om de Beller's ID te controleren op het moment dat u een nieuwe oproep ontvangt zonder een blik te werpen op het beeldscherm, met andere woorden, het telefoonnummer wordt aangekondigd (op voorwaarde dat het nummer niet door de beller geblokkeerd is). Als u het nummer en de bijbehorende naam van de binnenkomende oproep in het telefoonboek heeft opgeslagen, zal ook de naam aangekondigd worden.

Druk op de **'MENU'** 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om **'SET TALK'** (= **Aankondiging instellen**) te kiezen.

Druk op de **'SELECT'** 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om **'CID TALKING'** (= **Beller's ID aankondiging**) te kiezen.

Gebruik ▲ en ▼ om **'ON'** (= **Aan**) of **'OFF'** (= **Uit**) te kiezen om zodoende deze functie te activeren / deactiveren.

Druk op de **'SELECT'** 'softkey' om te bevestigen.

Telefoonboek en Beller's ID lijst bekijken

Deze telefoon kan in het telefoonboek opgeslagen nummers en de Beller's ID lijst (behalve Privé en Buiten Gebied) aankondigen. Als er een bijbehorende naam samen het telefoonnummer opgeslagen is, zal ook de naam aangekondigd worden.

Druk op de **'MENU'** 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om **'SET TALK'** (= **Aankondiging instellen**) te kiezen.

Druk op de **'SELECT'** 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om **'REVIEW TALKING'** (= **Aankondigingen bekijken**) te kiezen.

INSTALLATIE

Druk op ▲ of ▼ om 'ON' (= Aan) of 'OFF' (= Uit) te kiezen om zodoende deze functie te activeren/deactiveren.

Druk op de 'SELECT' 'softkey' om te bevestigen.

Aansporing voor opnames

U kunt de taal kiezen waarmee de aansporing wordt afgespeeld.

Druk op de 'MENU' 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om 'SET TALK' (= Aankondiging instellen) te kiezen.

Druk op de 'SELECT' 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om 'VOICE PROMPT' (= Aansporing voor opnames) te kiezen.

Gebruik ▲ en ▼ om de gewenste taal (Engels, Duits of Frans) te kiezen.


Druk op de 'SELECT' 'softkey' om te bevestigen.


INSTALLATIE

Instellingen van het ontvangstvolumen en de toon

U kunt tijdens een conversatie het ontvangstvolumen en de toon veranderen volgens uw gehoorsbehoeften.


Gebruik de volumeschuifregelaar aan de voorkant van het basisstation om het niveau aan te passen. Het volume kan veranderd worden van 0dB tot 15dB.

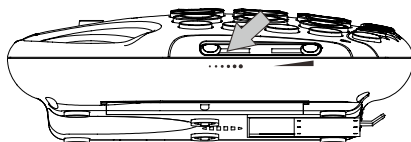

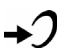De  knop op de telefoon levert extra versterking van het geluid, d.w.z. de volumeverandering zal 15-30dB worden. Wanneer de versterkingsfunctie geactiveerd is, zal de AMPLIFY (= Versterking) LED oplichten.




Standaard instelling voor versterking


De AMPLIFY **AAN/UIT** schakelaar () aan de achterkant maakt het mogelijk om de versterking standaard AAN of UIT te zetten elke keer dat u de telefoon gebruikt.

AMPLIFY AAN/UIT schakelaar in de AAN stand ()

De extra versterking en toonregelaar worden automatisch geactiveerd elke keer dat u de telefoon gebruikt. De AMPLIFY LED zal oplichten wanneer u de telefoon gebruikt.

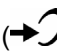Een druk op de AMPLIFY knop () tijdens een conversatie zal de extra versterking- en toonregelaars uitschakelen. U kunt echter het ontvangstvolumen van de handset nog steeds veranderen m.b.v. de volumeschuifregelaar.

Onafhankelijk van hoeveel keer u tijdens een conversatie de AMPLIFY knop

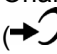() indrukt, zullen deze functies opnieuw geactiveerd worden bij de volgende keer dat u de handset oppakt om iemand te bellen.

INSTALLATIE

AMPLIFY AAN/UIT schakelaar in de UIT stand ()

De extra versterking en toonregelaar worden automatisch uitgeschakeld elke keer dat u de telefoon gebruikt. De AMPLIFY LED zal uitstaan elke keer dat u de telefoon gebruikt.

Een enkele druk op de AMPLIFY knop (→↻) tijdens een conversatie zal de toonregelaar en extra versterking inschakelen. De LED zal oplichten om deze verandering weer te geven. Als u de AMPLIFY knop (→↻) nog een keer indrukt, zullen de extra versterking en toonregelaar opnieuw uitgeschakeld worden. De LED zal uitgaan om deze verandering weer te geven.

Onafhankelijk van hoeveel keer u tijdens een conversatie de AMPLIFY knop (→↻) indrukt, zullen deze functies opnieuw uitgeschakeld worden bij de volgende keer dat u de handset oppakt om iemand te bellen.

Aanpassing van de ontvangsttoon

Als het ontvangstvolume versterkt is, kan ook de toonregelaar aangepast worden. U kunt de lage en hoge frequentiegeluiden aanpassen m.b.v. de toonschuifregelaar boven aan het basisstation.



NB: De toonregeling zal niet aangetast worden als de versterking NIET wordt gebruikt.

DE TELEFOON GEBRUIKEN

Iemand bellen


Neem de handset ter hand.

Wanneer u de kiestoon hoort, toets u het nummer in op het toetsenbord.

Leg de handset terug om het gesprek te beëindigen.

Iemand handenvrij bellen

Om een kiestoon te krijgen, drukt u op de  knop. Toets daarna het telefoonnummer in op het toetsenbord. Het  pictogram verschijnt op de LCD display. Druk nogmaals op de  knop om het gesprek te beëindigen. Het  pictogram zal verdwijnen.

Om tijdens een gesprek de Handenvrij functie te activeren, drukt u op de  knop en legt u de handset tegelijkertijd terug op de basis.

Om tijdens een gesprek de Handenvrij functie uit te schakelen, neemt u de handset ter hand.

NB: Wanneer de telefoon in de handenvrij stand staat, mag er slechts één persoon praten. De overschakeling van luidspreker naar microfoon is automatisch. Dit is afhankelijk van het geluidsniveau van respectievelijk de binnenkomende oproep en de microfoon. Het is daarom essentieel dat er geen harde geluiden (bijv. muziek) in de onmiddellijke omgeving van de telefoon zijn, omdat dit de handenvrij functie zal verstoren.

Instelling van het volume van de luidspreker

In de handenvrij stand kan het luidspreekervolume worden aangepast m.b.v. de VOL+ of VOL- volumeregelaar aan de rechterkant van de telefoon.


Invoer voordat u een telefoonnummer draait


U kunt het gewenste telefoonnummer in de stand-by stand invoeren zodat u voordat u belt correcties kunt maken. Volg deze stappen:

Toets een telefoonnummer van max. 32 cijfers in. Controleer dit. Als u een fout maakt met het nummer invoeren dan drukt u op de 'CLEAR' (= Wissen) 'softkey' om dit te herstellen.


Als het nummer juist is, neemt u de handset ter hand en drukt u op de  knop.



Laatste nummer opnieuw bellen


Neem de handset ter hand of druk de  knop in om handenvrij te bellen.

Druk op  om het laatst ingetoetste nummer opnieuw te bellen.

Een nummer bellen uit de lijst van de laatst gedraaide nummers

In de stand-by stand drukt u op .

Gebruik  en  om door de lijst van de laatst gedraaide nummers te scrollen totdat u het gewenste nummer vindt.

Neem de handset ter hand of druk de  knop in om handenvrij te bellen.

De lijst van de laatst gedraaide nummers wissen

In de stand-by stand drukt u op .

Druk op de **0** knop en houd deze ingedrukt. De LCD display zal 'EMPTY LIST' (= **Lege lijst**) tonen om aan te geven dat alle nummers in de lijst van de laatst gedraaide nummers gewist zijn.

Stilmodus (Mute) functie

Als u dit wenst, kunt u privé met iemand anders in de kamer praten zonder dat degene aan de andere kant van de lijn u kan horen. U kunt nog steeds degene aan de andere kant van de lijn horen, maar zij kunnen u niet horen zolang de stilmodus werkzaam is.

DE TELEFOON GEBRUIKEN

Om tijdens een gesprek de stilmodus functie in te schakelen drukt u op de '**MUTE**' 'softkey' ('**MUTE**' zal op het beeldscherm verschijnen). De andere kant van de lijn kan u niet meer horen. Druk op de '**UNMUTE**' 'softkey' om uw gesprek te hervatten ('**MUTE**' zal van het beeldscherm verdwijnen).

Wachtstand functie

U kunt een gesprek in de wachtstand zetten. Dit doet u door tijdens een gesprek de '**HOLD**' (= **In de wachtstand**) 'softkey' in te drukken. De LCD display zal '**CALL ON HOLD**' (= **Gesprek in de wachtstand**) tonen. Als u nu ophangt, zal het gesprek niet afgebroken worden.

Om het gesprek voort te zetten neemt u de handset ter hand of drukt u op de '**UNHOLD**' (= **Uit de wachtstand**) 'softkey'.


Een gesprek aannemen


Wanneer een inkomend gesprek wordt ontvangen, dan geeft de telefoon een belsignaal en de indicator van inkomende gesprekken zal oplichten. Als u voice-mail heeft, zal de mededeling '**NEW VOICE MAIL**' (= **Nieuw voice-mail**) op de LCD display getoond worden. Om dit bericht te wissen drukt u in de stand-by stand op **▲** en dan drukt u op **4** en houd deze knop ingedrukt.

Neem de handset ter hand en spreek.

Leg de handset terug om het gesprek te beëindigen.

Een gesprek handenvrij aannemen

Druk de  knop in om handenvrij te spreken.

Druk nogmaals op de  knop om het gesprek te beëindigen.


Gebruik van gehoorapparaten

Deze telefoon is compatibel met gehoorapparaten. Kies de T-modus op uw gehoorapparaat om deze functie in te schakelen.

Flash signaal

De **R** knop kan gebruikt worden met speciale services zoals Wachtstand (indien uw telefoondienst dit levert) of om externe gesprekken naar een ander op een privé telefooncentrale aangesloten toestel over te zetten.



Schudapparaat

Aan de achterkant van de telefoon zit een 3,5mm stekerbuis  voor het schudapparaat. U kunt een schudapparaat (optioneel) hier insteken. Als er een oproep binnenkomt, zal het schudapparaat beginnen te schudden. (Zie de Instelling van de aankondiging van binnenkomende oproepen.)

Gebruik van de koptelefoon en halslus

Aan de achterkant van uw telefoon zit zowel een stekerbuis voor audio als een stekerbuis voor een koptelefoon. Beide stekerbussen zijn versterkt wat u in staat stelt om zowel de toon als het volume te veranderen.

De stekerbuis voor de halslus maakt het mogelijk via uw halslus te luisteren terwijl u in de handset of – bij handenvrij bellen – in de microfoon van de telefoon spreekt.


De stekerbuis voor de koptelefoon maakt het mogelijk om via uw handenvrije koptelefoon te luisteren en te spreken. Steek de koptelefoon in de met  gemarkeerde 2,5 mm stekerbuis aan de achterkant van het basisstation. Druk op  om een kiestoon te krijgen.

BELLER'S ID

De in deze sectie beschreven kenmerken zijn alleen maar beschikbaar als u zich abonneert op de Beller's ID dienst bij uw dienstverlener. Beller's ID betekent dat u op het beeldscherm van uw handset kunt zien wie u oproept (op voorwaarde dat het nummer niet onderdrukt is, niet beschikbaar is of het een internationaal gesprek betreft).

Het beeldscherm toont '**PRIVATE**' (= '**PRIVÉ**') voor een onderdrukt nummer. Het beeldscherm toont '**Out of Area**' (= **Buiten gebied**) als iemand belt uit een gebied waar de telefoonmaatschappij geen Beller's ID diensten aanbiedt of geen doorlevering van nummers aan uw gebied heeft.

Het nummer en de naam van de beller zal met de datum en de tijd van de oproep opgeslagen worden in de Beller ID lijst onafhankelijk van het feit of u de oproep beantwoordt of niet. Deze lijst slaat de laatste 30 binnenkomende oproepen van max. 15 cijfers op.

The LED van New Call (= Nieuwe oproep) zal beginnen te knipperen om u te waarschuwen dat er een nieuwe oproep is. Als u niet wilt dat deze LED begint te knipperen dan schakelt u de indicator van een nieuwe oproep () aan de rechterkant van de telefoon UIT.

De Beller's ID lijst bekijken

Gebruik ▲ en ▼ om door de Beller's ID lijst te scrollen. De nummers zullen op volgorde van binnenkomst getoond worden. Door deze lijst scrollen om nieuwe oproepen te bekijken, zal de '**NEW CALL**' teller op nul zetten en de '**NEW CALL**' LED zal uitgeschakeld worden.

Een nummer bellen uit de Beller's ID lijst

Gebruik ▲ en ▼ om door de Beller's ID lijst te scrollen totdat u het gewenste nummer vindt.

Neem de handset ter hand en druk op de  knop; het nummer wordt automatisch gedraaid. (Als het nummer 10 of 11 cijfers lang is, kunt u aan het begin van de cijferreeks een 1 toevoegen of diverse cijfers verwijderen, bijvoorbeeld: als het originele nummer in de Beller's ID lijst 800-965-9043 was dan drukt u herhaaldelijk op de * toets om het in 1-800-965-9043 of 965-9043 te veranderen, of als het nummer 1-987-654-3210 was dan drukt u herhaaldelijk op de * toets om het in 987-654-3210 of 654-3210 te veranderen.)

BELLER'S ID

Een Nummer uit de Beller's ID lijst toevoegen aan het Telefoonboek

Gebruik ▲ en ▼ om door de Beller's ID lijst te scrollen totdat u het nummer dat u aan het telefoonboek wilt toevoegen vindt.

Druk op de 'OPTIONS' (= Opties) 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om 'STORE' (= Opslaan) te kiezen.

'NAME:' (= Naam:) zal getoond worden.

Voer de gewenste naam m.b.v. het numerieke toetsenbord in.

Gebruik ▼ als u het nummer wilt veranderen.

Verander het telefoonnummer als dit niet juist is met de 'CLEAR' (= Wissen) functie.

Druk op de 'SAVE' (= Bewaar) 'softkey' om te bevestigen.

'RECORD VOICE' (= 'Stemgeluid opnemen') zal getoond worden.

Kies 'YES' (= Ja) om dit te bevestigen of 'NO' (= Nee) om dit te annuleren. Als u dit bevestigt dan heeft u max. 6 seconden de tijd om de naam van de registratie uit het telefoonboek op te nemen. U kunt ook op 'End' (= Einde) drukken om dit te bevestigen en om de opname te beëindigen. Uw opname zal onmiddellijk afgespeeld worden.

Een nummer uit de Beller's ID lijst wissen

Gebruik ▲ en ▼ om door de Beller's ID lijst te scrollen totdat u het nummer dat u uit de Beller's ID lijst wilt wissen vindt.

Druk op de 'OPTIONS' (= Opties) 'softkey'.

BELLER'S ID

Gebruik ▲ en ▼ om 'ERASE' (= Wissen) te kiezen.

Alle nummers uit de Beller's ID lijst wissen

Gebruik ▲ en ▼ om toegang te krijgen tot de Beller's ID lijst.

Druk op de 'OPTIONS' (= Opties) 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om 'ERASE ALL' (= Alles wissen) te kiezen.

'ERASE ALL?' (= 'ALLES WISSEN?') zal getoond worden.

Kies 'YES' (= Ja) om dit te bevestigen of 'NO' (= Nee) om dit te annuleren.

Door alle nummers uit de Beller's ID lijst te wissen zal de Alle Oproepen teller op nul gezet worden.

Beller's ID in geval van een oproep in de wachtstand

De naam en het nummer van de tweede beller zal getoond worden als u de telefoon gebruikt op voorwaarde dat u zich bij uw dienstverlener geabonneerd heeft op Oproep in de Wachtstand.

Druk op de **R** toets en vervolgens op '2' om de tweede beller te woord te staan.

Wanneer u het tweede gesprek beëindigd heeft, drukt u op **R** en vervolgens op '2' om de conversatie met de eerste beller te hervatten.

TELEFOONBOEK

Telefoonnummers kunnen in het telefoonboek opgeslagen worden. Het stelt u in staat om regelmatig gebruikte nummers op te slaan zodat u gemakkelijk iemand kunt bellen zonder dat u zich het telefoonnummer moet herinneren of het telkens opnieuw moet invoeren.

Het telefoonboek kan 39 registraties bevatten. Elk telefoonnummer kan max. 24 cijfers bevatten.

M.b.v. het Menu een Registratie in het Telefoonboek maken

Druk op de **'PHONEBK'** (= **Telefoonboek**) 'softkey' om toegang te krijgen tot het telefoonboek.

Druk op de **'SELECT'** (= **Kiezen**) 'softkey' om **'ADD NEW NAME'** (= **Nieuwe naam toevoegen**) te kiezen.

'NAME:' (= **Naam:**) zal getoond worden.

Voer de gewenste naam m.b.v. het numerieke toetsenbord in.

Druk op de **'SAVE'** (= **Bewaar**) 'softkey' om te bevestigen.

'NUMBER:' (= **Nummer:**) zal getoond worden.

Voer het gewenste nummer in m.b.v. het numerieke toetsenbord (max. 24 cijfers).

Druk op de **'SAVE'** (= **Bewaar**) 'softkey' om te bevestigen.

'RECORD VOICE' (= **'Stemgeluid opnemen'**) zal getoond worden.

Kies **'YES'** (= **Ja**) om dit te bevestigen of **'NO'** (= **Nee**) om dit te annuleren. Als u dit bevestigt dan heeft u max. 6 seconden de tijd om de naam van de registratie uit het telefoonboek op te nemen. U kunt ook op **'End'** (= **Einde**) drukken om dit te bevestigen en om de opname te beëindigen. Uw opname zal onmiddellijk afgespeeld worden.

Herhaal dit als u meer registraties aan het telefoonboek wilt toevoegen.

TELEFOONBOEK

Een registratie in het telefoonboek maken vanuit de stand-by stand

Voer een telefoonnummer in terwijl u in de stand-by stand staat.

Druk op de **'STORE'** (= Opslaan) 'softkey'.

'NAME:' (= Naam:) zal getoond worden.

Voer de gewenste naam m.b.v. het numerieke toetsenbord in.

Druk op de **'SAVE'** (= Bewaar) 'softkey' om te bevestigen.

Gebruik ▼ als u het nummer wilt veranderen.

Verander het telefoonnummer als dit niet juist is met de **'CLEAR'** (= Wissen) functie.

Druk op de **'SAVE'** (= Bewaar) 'softkey' om te bevestigen.

'RECORD VOICE' (= 'Stemgeluid opnemen') zal getoond worden.

Kies **'YES'** (= Ja) om dit te bevestigen of **'NO'** (= Nee) om dit te annuleren. Als u dit bevestigt dan heeft u max. 6 seconden de tijd om de naam van de registratie uit het telefoonboek op te nemen. U kunt ook op **'End'** (= Einde) drukken om dit te bevestigen en om de opname te beëindigen. Uw opname zal onmiddellijk afgespeeld worden.


Herhaal dit als u meer registraties aan het telefoonboek wilt toevoegen.

NB: Als u een fout maakt bij het invoeren van een naam of een nummer, druk dan op de **'CLEAR'** (= Wissen) 'softkey' en voer het juiste cijfer/letterteken in. Als een 'Voice Prompt' met de registratie is opgenomen, zal er een pictogram naast de naam verschijnen.

TELEFOONBOEK

Een pauze inlassen

Een pauze geeft een vertraging van 3 seconden. Dit is noodzakelijk voor sommige telefoonsystemen.

Om een pauze tussen cijfers in te lassen terwijl u een nummer opslaat, druk dan op de  knop totdat 'P' op de LCD display verschijnt.

Overzicht van letters/tekens

Toets	Tekens/cijfers in de opeenvolgende volgorde				
0	0				.
1	Spatie		*	,	1
2	Aa	Bb	Cc	(2
3	Dd	Ee	Ff)	3
4	Gg	Hh	Ii	#	4
5	Jj	Kk	Ll	/	5
6	Mm	Nn	Oo	'	6
7	Pp	Qq	Rr	Ss	7
8	Tt	Uu	Vv	?	8
9	Ww	Xx	Yy	Zz	9

Als u letters invoert, kunt u tussen hoofdletters en kleine letters wisselen door op de * toets te drukken. Als u tweemaal dezelfde letter of een andere letter met dezelfde toets moet typen, wacht dan een paar seconden: de cursor zal automatisch naar de volgende invoer verspringen.

Een registratie in het telefoonboek bekijken

Druk op de 'PHONEBK' (= **Telefoonboek**) 'softkey' om toegang te krijgen tot het telefoonboek.


Gebruik ▲ en ▼ om door het telefoonboek te scrollen totdat u het contact dat u wilt bekijken vindt. Als de functie 'Aankondigingen bekijken' geactiveerd is, zal het nummer (of de naam indien opgenomen) van de gemarkeerde registratie aangekondigd worden.

Druk op de 'VIEW' (= **Bekijken**) 'softkey' om de gegevens van die registratie in het telefoonboek te bekijken.

Een registratie in het telefoonboek bellen

Druk op de '**PHONEBK**' (= **Telefoonboek**) 'softkey' om toegang te krijgen tot het telefoonboek.

Gebruik ▲ en ▼ om door het telefoonboek te scrollen totdat u het contact dat u wilt bellen vindt.

Neem de handset ter hand en druk op de  knop; het nummer wordt automatisch gedraaid.

Een registratie in het telefoonboek wijzigen

Druk op de '**PHONEBK**' (= **Telefoonboek**) 'softkey' om toegang te krijgen tot het telefoonboek.

Gebruik ▲ en ▼ om door het telefoonboek te scrollen totdat u het contact dat u wilt bewerken vindt.

Druk op de '**VIEW**' (= **Bekijken**) 'softkey' om de gegevens van die registratie in het telefoonboek te bekijken.

Druk op de '**OPTIONS**' (= **Opties**) 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om '**EDIT**' (= **Bewerken**) te kiezen.

De cursor zal rechts van de naam beginnen te knipperen. Wis m.b.v. de '**CLEAR**' (= **Wissen**) 'softkey' de laatste tekens van de naam en voer daarna de juiste teken(s) in.

Druk op ▼ om het telefoonnummer te bewerken.

De cursor zal rechts van het nummer beginnen te knipperen. Wis m.b.v. de '**CLEAR**' (= **Wissen**) 'softkey' de laatste cijfers van de naam en voer daarna de juiste cijfers in. Druk op de '**SAVE**' (= **Bewaar**) 'softkey' om te bevestigen.

Een registratie in het telefoonboek wissen

Druk op de '**PHONEBK**' (= **Telefoonboek**) 'softkey' om toegang te krijgen tot het telefoonboek.

Gebruik ▲ en ▼ om door het telefoonboek te scrollen totdat u het contact dat u wilt bewerken vindt.

Druk op de '**VIEW**' (= **Bekijken**) 'softkey' om de gegevens van die registratie in het telefoonboek te bekijken.

Druk op de '**OPTIONS**' (= **Opties**) 'softkey' om de gegevens van die registratie in het telefoonboek te bekijken.

Gebruik ▲ en ▼ om '**ERASE**' (= **Wissen**) te kiezen en druk daarna op '**SELECT**'.

Een registratie met stemgeluid aankondigen

Druk op de '**PHONEBK**' (= **Telefoonboek**) 'softkey' om toegang te krijgen tot het telefoonboek.

Gebruik ▲ en ▼ om door het telefoonboek te scrollen totdat u het contact dat u wilt bewerken vindt.

Druk op de '**VIEW**' (= **Bekijken**) 'softkey' om de gegevens van die registratie in het telefoonboek te bekijken.

Druk op de '**OPTIONS**' (= **Opties**) 'softkey' om de gegevens van die registratie in het telefoonboek te bekijken.

Druk op de '**PLAY VOICE**' (= **Stemgeluid afspelen**) 'softkey' en druk daarna op '**SELECT**' (= **Kiezen**). De 'Voice Prompt' voor deze registratie zal aangekondigd worden. De naam zal aangekondigd worden indien deze opgeslagen is. Als er geen naam opgeslagen is, zal alleen het telefoonnummer aangekondigd worden.

Een registratie met aankondiging via stemgeluid opnemen

Druk op de '**PHONEBK**' (= **Telefoonboek**) 'softkey' om toegang te krijgen tot het telefoonboek.

Gebruik ▲ en ▼ om door het telefoonboek te scrollen totdat u het contact dat u wilt bewerken vindt.

Druk op de '**VIEW**' (= **Bekijken**) 'softkey' om de gegevens van die registratie in het telefoonboek te bekijken.

Druk op de '**OPTIONS**' (= **Opties**) 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om '**RECORD VOICE**' (= **Stemgeluid opnemen**) te kiezen.

Druk op de '**SELECT**' 'softkey'.

Kies '**YES**' (= **Ja**) om dit te bevestigen of '**NO**' (= **Nee**) om dit te annuleren. Als u dit bevestigt dan heeft u max. 6 seconden de tijd om de naam van de registratie uit het telefoonboek op te nemen. U kunt ook op '**End**' (= **Einde**) drukken om dit te bevestigen en om de opname te beëindigen. Uw opname zal onmiddellijk afgespeeld worden.

Een registratie met aankondiging via stemgeluid wissen

Druk op de '**PHONEBK**' (= **Telefoonboek**) 'softkey' om toegang te krijgen tot het telefoonboek.

Gebruik ▲ en ▼ om door het telefoonboek te scrollen totdat u het contact dat u wilt bewerken vindt.

Druk op de '**VIEW**' (= **Bekijken**) 'softkey' om de gegevens van die registratie in het telefoonboek te bekijken.

TELEFOONBOEK

Druk op de 'OPTIONS' (= Opties) 'softkey'.


Gebruik ▲ en ▼ om 'ERASE VOICE' (= Stemgeluid
wissen) te kiezen en druk daarna op 'SELECT' (= Kiezen).

SNELDRAAIEN

Deze telefoon heeft 9 geheugenknoppen voor snel draaien. Zes van deze knoppen zijn sneldraaiknoppen en de andere drie zijn knoppen om nummers voor noodgevallen te draaien. Deze NOOD nummers zijn de ideale plaats om het nummer van de dokter of van een intieme vriend op te slaan. Als het nummer eenmaal op deze geheugenplaats opgeslagen is, hoeft u alleen maar één knop in te drukken om het nummer te draaien.

Een sneldraainummer maken


Voer het telefoonnummer in dat opgeslagen moet worden (max. 32 cijfers). U kunt het nummer bewerken m.b.v. de 'CLEAR' (= **Wissen**) 'softkey'.

Druk op . De LCD display zal '→?' tonen.

Kies de plaats van het op te slaan sneldraainummer door op de bijbehorende knop te drukken. 'SAVED' (= 'BEWAARD') zal getoond worden.


Een sneldraainummer bekijken/bellen

Druk in de stand-by stand op de gewenste locatie van een sneldraainummer. Het telefoonnummer zal getoond worden.

Neem de handset ter hand en druk op  om het sneldraainummer te draaien.

NB: U kunt ook één van de sneldraai / NOOD nummers ongeveer 1 seconde indrukken om automatisch de handenvrij functie in te schakelen en het gewenste nummer te draaien.

Een sneldraainummer wissen

Druk op . De LCD display zal '→' tonen.

Kies de te wissen plaats van het sneldraainummer. 'SAVED' (= 'BEWAARD') zal getoond worden. Het nummer zal uit de plaats gewist worden. Een andere manier is om een nieuw nummer op te slaan, waardoor het oude nummer automatisch gewist wordt.

ANTWOORDAPPARAAT

Het antwoordapparaat aan- of uitzetten

Het antwoordapparaat kan als volgt AAN of UIT gezet worden:

Druk op de '**MENU**' 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om '**TAM SETUP**' (= **TAM instelling**) te kiezen.

Druk op de '**SELECT**' 'softkey'.

Druk op de '**SELECT**' (= **Kiezen**) 'softkey' om '**TAM ON/OFF**' (= **TAM aan/uit**) te kiezen.

Druk op ▲ of ▼ om '**ON**' (= **Aan**) of '**OFF**' (= **Uit**) te kiezen om zodoende het antwoordapparaat te activeren/deactiveren.

Druk op de '**SAVE**' (= **Bewaar**) 'softkey' om te bevestigen.

Als het antwoordapparaat AAN staat, zullen binnenkomende oproepen na een bepaald aantal keren overgaan (zie Instellingen van het Antwoordapparaat) door het apparaat beantwoord worden. Wanneer het antwoordapparaat een binnenkomende oproep beantwoordt, zal degene die belt de uitgaande mededeling horen. Na een korte pieptoon kunnen ze dan een bericht achterlaten.

Als het antwoordapparaat UIT staat, zal het een binnenkomende oproep na 10 keer overgaan beantwoorden. Dit is om op afstand toegang te krijgen tot bepaalde functies mogelijk te maken.

Uw CL455 antwoordapparaat kan in werking worden gesteld door:

- Het telefoonapparaat
- Op afstand vanaf elke externe telefoon

ANTWOORDAPPARAAT

Uitgaande mededeling

U moet een uitgaande mededeling opnemen voordat u het antwoordapparaat gebruikt. De uitgaande mededeling is uw bericht dat een beller hoort en het kan max. 2 minuten duren.

De standaard UGM (= uitgaande mededeling) is "Laat uw bericht achter na de pieptoon". U kunt ook uw eigen UGM opnemen als u dat wilt.

Een uitgaande mededeling opnemen

Druk op de '**MENU**' 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om '**TAM SETUP**' (= **TAM instelling**) te kiezen.

Druk op de '**SELECT**' 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om '**OUTGOING MSG**' (= **uitgaande mededeling**) te kiezen.

Druk op de '**SELECT**' 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om '**RECORD OGM**' (= **UGM opnemen**) te kiezen.

Druk op de '**SELECT**' 'softkey'.

'**RECORD OGM?**' (= **UGM opnemen?**) zal getoond worden.

Kies '**YES**' (= **Ja**) om dit te bevestigen of '**NO**' (= **Nee**) om dit te annuleren.

Zodra u de toon hoort, neemt u uw eigen UGM op. Druk op de '**END**' (= **Einde**) 'softkey' wanneer u klaar bent. Als u langer dan 2 minuten spreekt, zal het opnemen automatisch stoppen. De nieuwe UGM zal na het opnemen afgespeeld worden.

ANTWOORDAPPARAAT

Een uitgaande mededeling controleren

Druk op de **'MENU'** 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om **'TAM SETUP'** (= TAM instelling) te kiezen.

Druk op de **'SELECT'** 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om **'OUTGOING MSG'** (= uitgaande mededeling) te kiezen.

Druk op de **'SELECT'** 'softkey'.

Druk op de **'SELECT'** (= Kiezen) 'softkey' om **'PLAY OGM'** (= UGM afspelen) te kiezen.

De huidige UGM zal afgespeeld worden. Tijdens het afspelen zal **'PLAYING OGM'** (= UGM wordt afgespeeld) op de display te zien zijn. Druk op de **'EXIT'** (= Afsluiten) 'softkey' om het afspelen te stoppen of druk op de **'REPLAY'** (= Opnieuw afspelen) 'softkey' om het opnieuw af te spelen.

De uitgaande mededeling herstellen

U kunt de door uzelf opgenomen UGM wissen en de standaard UGM ervoor in de plaats zetten.

Druk op de **'MENU'** 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om **'TAM SETUP'** (= TAM instelling) te kiezen.

Druk op de **'SELECT'** 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om **'OUTGOING MSG'** (= uitgaande mededeling) te kiezen.

ANTWOORDAPPARAAT

Druk op de 'SELECT' 'softkey'.

STAP A: Gebruik ▲ en ▼ om 'ERASE MSG' (= Mededeling wissen) te kiezen.

Druk op de 'SELECT' 'softkey'.

'ERASE RECORDED OGM?' (= Opgenomen UGM wissen?) zal getoond worden.

Kies 'YES' (= Ja) om dit te bevestigen of 'NO' (= Nee) om dit te annuleren.

U kunt ook in **STAP A** het volgende kiezen, zodat u tussen de standaard UGM en de door u opgenomen UGM kunt wisselen:

Gebruik ▲ en ▼ om 'CHANGE MSG' (= Mededeling veranderen) te kiezen.

Druk op de 'SELECT' 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om 'DEFAULT OGM' (= Standaard UGM) of 'RECORDED OGM' (= Opgenomen UGM) te kiezen.

Instellingen van het Antwoordapparaat

U kunt het aantal keren kiezen dat de telefoon overgaat voordat het antwoordapparaat geactiveerd wordt en op een binnenkomende oproep reageert. U heeft de volgende keuzes:

- 3 rings = oproep wordt beantwoord na 3 keer overgaan.
- 4 rings = oproep wordt beantwoord na 4 keer overgaan.
- 5 rings = oproep wordt beantwoord na 5 keer overgaan.
- 6 rings = oproep wordt beantwoord na 6 keer overgaan.
- TS (TOLL SAVER) = activeert de Toll Saver functie.

In de Toll Saver stand zullen binnenkomende oproepen na 5 keer overgaan beantwoord worden, totdat het eerste beller's bericht opgenomen is. Als eenmaal een bericht opgenomen is, zal het antwoordapparaat na 3 keer overgaan reageren. Dit is handig als u probeert om op afstand toegang te krijgen tot het antwoordapparaat. Als het antwoordapparaat bij de vierde keer

ANTWOORDAPPARAAT

overgaan nog niet gereageerd heeft, dan zijn er geen nieuwe berichten en kunt u ophangen voordat de oproep in rekening wordt gebracht. Als het antwoordapparaat na 3 keer overgaan reageert, dan zijn er nieuwe berichten opgenomen.

Druk op de **'MENU'** 'softkey'.

Gebruik **▲** en **▼** om **'TAM SETUP'** (= **TAM instelling**) te kiezen.

Druk op de **'SELECT'** 'softkey'.

Gebruik **▲** en **▼** om **'RING NUMBER'** (= **Aantal keren overgaan**) te kiezen.


Druk op de **'SELECT'** 'softkey'.

Gebruik **▲** en **▼** om **'3 RINGS'**, **'4 RINGS'**, **'5 RINGS'**, **'6 RINGS'** of **'TOLL SAVER'** te kiezen.


Druk op de **'SAVE'** (= **Bewaren**) 'softkey'.

Naar berichten luisteren


Als u een nieuw bericht ontvangen heeft, zal de display tonen hoeveel nieuwe berichten u ontvangen heeft en de Nieuw Bericht LED zal branden.

Druk op de  toets om het bericht af te spelen. Om de berichten via de


luidspreker af te spelen drukt u op  terwijl de telefoon op de haak ligt. Om

de berichten via de hoorn af te spelen drukt u op  nadat u de handset ter hand heeft genomen. U hoort "U hebt N nieuwe berichten" of "U hebt N oude berichten". De berichten worden na elkaar afgespeeld. Tijdens het afspelen kunt u het volgende doen:


Druk op **C** om het huidige bericht te wissen.


Druk eenmaal op  om het huidige bericht opnieuw af te spelen.

ANTWOORDAPPARAAT

Druk tweemaal op  om het vorige bericht opnieuw af te spelen.

Druk op  toets om het volgende bericht af te spelen.

Druk op  of op de '**EXIT**' (= **Afsluiten**) 'softkey' om het afspelen te stoppen of om het programma af te sluiten.

Gebruik VOL+ of VOL- aan de rechterkant van de telefoon om het afspeelvolumen aan te passen. U kunt ook de versterking  gebruiken terwijl u het antwoordapparaat gebruikt.

Het antwoordapparaat zal naar de stand-by stand terugkeren als het afspelen afgelopen is. Alle binnenkomende berichten worden bewaard, tenzij u deze heeft gewist tijdens het afspelen (zie hierboven). Nieuwe berichten worden na oude berichten opgenomen.

Screening van oproepen

Binnenkomende berichten kunnen tijdens de ontvangst via de luidspreker gehoord worden. Als er geen geluid is, pas dan het volume aan m.b.v. de regelaar aan de rechterkant van de telefoon. Als u met de beller wilt spreken, neem dan de handset ter hand.

Langzaam afluisteren van een binnenkomend bericht

Als u moeite heeft een achtergelaten bericht te horen of te begrijpen kunt u het langzaam afspelen.

Druk op de '**MENU**' 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om '**TAM SETUP**' (= **TAM instelling**) te kiezen.

Druk op de '**SELECT**' 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om '**ICM VOICE SLOW**' (= **Langzaam afluisteren**) te kiezen.

Druk op de '**SELECT**' 'softkey'.

ANTWOORDAPPARAAT

Gebruik ▲ en ▼ om 'ON' (= Aan) of 'OFF' (= Uit) te kiezen.

Druk op de 'SAVE' (= Bewaren) 'softkey'.

Het antwoordapparaat op afstand in werking stellen

U kunt op afstand toegang krijgen tot het antwoordapparaat m.b.v. de toetsen van een gewone telefoon met TOON draaimodus.

Code op afstand

Een geheime 3-cijferige code is vereist om naar uw berichten te luisteren vanaf een andere externe telefoon op afstand. De standaard code is 123. Omwille van veiligheidsredenen wordt aanbevolen deze code te veranderen.

Druk op de 'MENU' 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om 'TAM SETUP' (= TAM instelling) te kiezen.

Druk op de 'SELECT' 'softkey'.

Gebruik ▲ en ▼ om 'SECURITY ID' (= Veiligheid ID) te kiezen.

Druk op de 'SELECT' (= Kiezen) 'softkey'.

De LCD display zal de ingestelde code tonen. Voer de gewenste nieuwe code in.

Druk op de 'SAVE' (= Bewaren) 'softkey'.

ANTWOORDAPPARAAT

Afstandsbediening

Bel het antwoordapparaat (door uw telefoonnummer te draaien).

Terwijl de uitgaande mededeling te horen is, toetst u de code in.

Als de code geaccepteerd wordt, zal het systeem het commandomenu afspelen. Daarna kunt u deze commando's voor de specifieke werking opvolgen.

Als u klaar bent, verbreekt u de verbinding.

Commando's voor op afstand bediening


Commando's

2	Nieuwe berichten afspelen
2 tweemaal intoetsen	Afspelen stoppen
0	Huidige bericht tijdens het afspelen wissen
1	Inspecteren
3	Naar het volgende bericht
4	Het antwoordapparaat aan- of uitzetten
7	Het menu herhalen

Een memo opnemen

U kunt een memo van maximaal 3 minuten achterlaten voor andere gebruikers van het antwoordapparaat.

Om een memo op te nemen drukt u in de stand-by stand op **MEMO** en houdt deze ingedrukt. De display zal '**RECORDING MEMO**' (= **Memo opnemen**) tonen en de opname beginnen. De **MEMO** toets moet ingedrukt gehouden worden tijdens de opname. Om de opname te beëindigen laat u de **MEMO** toets los.

Het memo kan afgespeeld worden door op de  toets van het antwoordapparaat te drukken of m.b.v. een gewone telefoon via de Toegang Op Afstand functie.

Geheugen is vol

De totale capaciteit van het geheugen van het antwoordapparaat is ongeveer 40 à 50 minuten. Het geheugen wordt gedeeld door de uitgaande mededeling, het persoonlijke memo en de binnenkomende berichten. Als het geheugen vol is, zal het antwoordapparaat na 10 keer overgaan reageren om afspelen en wissen van berichten op afstand mogelijk te maken; nieuwe berichten zullen niet opgenomen worden, totdat de oude berichten afgespeeld en gewist zijn.

FOUTOPSPORING

Geen beeldscherm

- Zorg ervoor dat de voedingsadapter correct is aangesloten en niet beschadigd is.
- Controleer of er in uw gebied geen stroomuitval is.

De CL455 gaat niet over

- Zorg ervoor dat het aansluitsnoer correct is aangesloten en niet beschadigd is.
- Verbind een andere telefoon met de PTT stekkerdoos of verplaats uw telefoon naar een andere stekkerdoos om te controleren of de storing aan uw telefoon ligt of aan de PTT stekkerdoos.
- Er kunnen teveel communicatieapparaten (bijv. modem, fax of een tweede telefoon) met één telefoonlijn verbonden zijn. Neem contact op met uw telefoondienst om het maximale aantal aansluitingen voor uw telefoonlijn (privé of zakelijk) te bepalen.
- Controleer of de Belsignaal schakelaar niet UIT staat.
- Controleer het volumeniveau van het belsignaal.

Geen kiestoon

- Zorg ervoor dat het aansluitsnoer correct is aangesloten en niet beschadigd is.
- Verbind een andere telefoon met de PTT stekkerdoos of verplaats uw telefoon naar een andere stekkerdoos om te controleren of de storing aan uw telefoon ligt of aan de PTT stekkerdoos.
- Er kunnen teveel communicatieapparaten (bijv. modem, fax of een tweede telefoon) met één telefoonlijn verbonden zijn. Neem contact op met uw telefoondienst om het maximale aantal aansluitingen voor uw telefoonlijn (privé of zakelijk) te bepalen.
- Controleer of de draaistand op de juiste instelling (toon of puls) is ingesteld.

Interferentie op de lijn

- Als u een DSL lijn heeft, zorg er dan voor dat alle telefooncontactdozen een filter hebben.

Informatie van Beller's ID wordt niet getoond

- Zorg ervoor dat u de dienst 'Beller's ID' bij uw dienstverlener heeft aangevraagd.

Geen versterking

- Controleer of de Versterkingstoets ingedrukt is en de LED brandt (rood lichtje).

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Algemeen

Gebruik alleen de met het product meegeleverde voeding.

Maak het toestel niet open. Neem voor alle reparaties contact op met de helpdesk.

De telefoon kan geluid tot een hoog volume versterken. Het is daarom belangrijk om gebruikers van de juiste werking op de hoogte te brengen. Aanbevolen wordt om de volumeregelaar in de laagste stand (LOW) te zetten wanneer de telefoon niet wordt gebruikt. Waarschuw andere gebruikers dat hun gehoor beschadigd kan worden bij onjuist gebruik.

Schoonmaken

Maak de telefoon met een zachte doek schoon. Nooit polijst- of schoonmaakmiddelen gebruiken: deze kunnen de afwerklaag of de elektrische onderdelen aan de binnenkant beschadigen.

Omgeving

Nooit aan direct zonlicht blootstellen.

Zorg er altijd voor dat er een vrije luchtstroom over de oppervlakten van de telefoon is.

Zet geen enkel deel van uw product in water en gebruik het niet in vochtige of natte omstandigheden zoals bijvoorbeeld in badkamers.

Stel uw product niet bloot aan vuur of andere gevaarlijke condities.

Haal tijdens onweer het aansluitsnoer van uw telefoon uit de stekkerdoos omdat dit uw telefoon kan beschadigen. Uw garantie geldt NIET voor schade veroorzaakt door onweer.

De telefoon is ontworpen te werken bij een temperatuurbereik van 5°C tot 45°C.

ALGEMENE INFORMATIE

VERKLARING: Hierbij verklaart Geemarc dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Richtlijn 1999/5/EG betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en in het bijzonder aan Artikel 3, paragraaf 1a, 1b en 2. De telefoon werkt niet als de lijnvoeding lager dan 18 mA is.

De nakomingsverklaring kan ingezien worden op www.geemarc.com.



Elektrische verbinding: Dit apparaat is ontworpen om slechts te functioneren met 230V / 50Hz voeding. (Geclassificeerd als 'gevaarlijk voltage' volgens de EN60950 norm.) Het apparaat heeft geen geïntegreerde AAN/UIT schakelaar. Om de voeding uit te schakelen moet u de voeding van het lichtnet uitschakelen of de wisselstroomadapter uit de wandcontactdoos halen. Zorg ervoor dat u gemakkelijk bij de contactdoos van het lichtnet kunt komen wanneer u het apparaat installeert.

Telefoonverbinding: Voltages aanwezig op het telecommunicatienetwerk zijn geclassificeerd TNV-3 (Telecommunicatie Netwerk Voltage) volgens de EN60950 norm.

RECYCLE RICHTLIJNEN

De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) is opgesteld om producten die aan het einde van hun nut zijn gekomen op de beste manier te recyclen.

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet in uw huishoudelijke afvalbak.

Gebruik liever een van de volgende stortingsopties:

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container.

Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container.

- Of overhandig het oude product aan uw detailhandelaar. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.

Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.



Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op

www.geemarc.com.

Telefoon 0328587599

of fax 0328587576

UGCL455_NL_v1.0



UGCL455_NL_V1.0

geemarc United Kingdom

5 Swallow Court
Swallowfields
Welwyn Garden City
Hertfordshire, AL7 1SB
For product support.
01707 384438

www.geemarc.com

geemarc France

Parc de l'Etoile
2, rue Galilée BP20061
59791 GRANDE SYNTHÉ CEDEX
TEL. SERVICE APRES VENTE.
03 28 58 75 99

www.geemarc.com

geemarc Deutschland

Siemensstrasse 10,
53121 Bonn
Deutschland
Tel: +49(0)228/ 74 87 09 0
Fax: +49(0)228/ 74 87 09 20

www.geemarc.com