

Sonic Boem Wekker met Bedvibratie, 5-standen Dimmer en USB Oplader Modelo SBT600ss



BEDIENINGSAANWIJZINGEN

Belangrijk

- Lees deze instructies zorgvuldig voorafgaande aan het gebruik en bewaar deze voor raadpleging in de toekomst. Zie de bedieningsaanwijzingen aan de achterkant.
- Gebruik alleen de meegeleverde adapter om het apparaat aan te sluiten.

Waarschuwing:

Om het risico van brand of elektrische schokken te voorkomen mag dit apparaat niet blootgesteld worden aan regen of vocht.




Voordat u verbinding maakt met de netvoeding moet u zich ervan verzekeren dat de op het apparaat vermelde vereisten overeenkomen met de beschikbare netvoeding, bijv. AC 100-240V~, 50/60 Hz.

- De ventilatie mag niet verhinderd worden door de ventilatieopeningen te bedekken met bijv. kranten, tafellakens, gordijnen, enz.
- Er mogen geen open vuurbronnen zoals brandende kaarsen op het apparaat geplaatst worden.
- Het mag niet blootgesteld worden aan druppels of opspattend vocht en er mogen geen objecten gevuld met vloeistoffen (zoals vazen) op het apparaat geplaatst worden.
- Zet het apparaat niet in gesloten boekenkasten of rekken zonder behoorlijke ventilatie.
- Als de lichtnetstekker wordt gebruikt om het apparaat te ontkoppelen, blijft het ontkoppelde apparaat klaar voor exploitatie.

Teststand:

- 1) Druk 3 seconden op de Sluimer en Test knoppen om toegang te krijgen tot de Teststand. De display toont "TEST" om aan te geven dat het in de Teststand is.
- 2) Als er geen knop wordt ingedrukt binnen de minuut, dan zal de Teststand sluiten en zal het naar de Tijdstand terugkeren.
- 3) Druk binnen de minuut op een willekeurige knop (behalve de Sluimer en Test knoppen die geen effect opleveren) om de Teststand te sluiten.
- 4) Het apparaat zal in de Teststand de functies van het apparaat tonen bijv. de zoemer, knipperen en vibrator (als de vibrator aangesloten is).
- 5) Druk op een willekeurige knop (behalve de Sluimer en Test knoppen die geen effect opleveren) om de Teststand te sluiten na afloop van de Teststand.

INSTRUCTIES

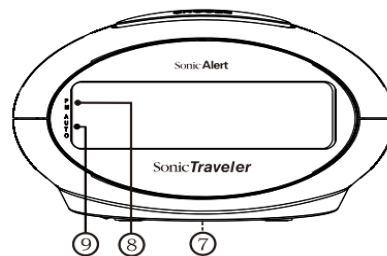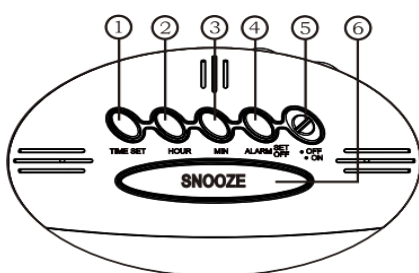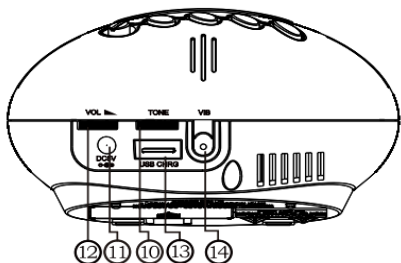

1. Tijdsinstelling	9. Auto (Alarm AAN indicatie)
2. Uren	10. Toon (verwisselen met Volume)
3. Minuten	11. DC 5V voeding
4. Alarm Instelling / Uit	12. Volume
5. Alarm Aan / Uit	13. USB Oplaadpoort
6. Sluimer / Dimmer	14. Vibrator stekkerbus
7. Batterijdeksel	
8. AM/PM indicatie	

De juiste tijd instellen

- 1) Druk op de **knop Tijdsinstelling (1)** en houdt deze ingedrukt terwijl u de **Urenknop (2)** indrukt om de klok snel voortuit te doen gaan totdat het juiste uur is bereikt.
 - 2) Druk op de **knop Tijdsinstelling (1)** en houdt deze ingedrukt terwijl u de **Minutenknop (3)** indrukt om de klok snel voortuit te doen gaan totdat de juiste minuut is bereikt.
- Een **verlichte stip (8)** in de linkerbovenhoek van het klockscherf geeft aan dat de tijd is PM (na 12 uur 's middags). De stip licht niet op voor de AM tijd (vóór 12 uur 's middags).

De alarmtijd instellen

- 1) Druk op de **knop Alarminstelling (4)** en houdt deze ingedrukt terwijl u de **Urenknop (2)** indrukt om de klok snel voortuit te doen gaan totdat het juiste uur is bereikt.
- 2) Druk op de **knop Alarminstelling (4)** en houdt deze ingedrukt terwijl u de **Minutenknop (3)** indrukt om de klok snel voortuit te doen gaan totdat de juiste minuut is bereikt.
- 3) Verzekert u ervan dat de alarmtijd correct op AM of PM ingesteld is. De **verlichte stip (8)** geeft PM aan. Let op: laat de Urenknop en Minutenknop los vóór dat u de knop Alarminstelling loslaat!.

12- of 24-uurs formaat kiezen

Druk 6 seconden op de **Urenknop (2)** om toegang te krijgen tot de uren keuzestand. Laat de **Urenknop (2)** los als de display '12 H' of '24 H' vertoont. Druk op de Urenknop en laat deze los om tussen 12 of 24 uur te wisselen. Als u niets kiest binnen de 4 seconden zal het laatst getoonde uurformaat gekozen worden en zal de display terugkeren naar de normale Tijdstand.

Wakker worden van het alarm

- 1) Als alleen de zoemer nodig is, moet u de vibrator niet aansluiten.
- 2) Stel het gewenste volume in door het **Volumewieltje (12)** voor het zoemergeluid te gebruiken.
- 3) Als alleen de vibrator nodig is, steekt u de vibratorstekker in de **Vibrator stekkerbus (14)** en zet u het volume uit met het **Volumewieltje (12)**.
- 4) Als zowel de zoemer als de vibrator nodig zijn, steekt u de vibratorstekker in de **Vibrator stekkerbus (14)** en stelt u het gewenste volumeniveau in.
- 5) Stel de alarmtijd / de wektijd in volgens de hierboven beschreven instructies voor de alarmtijd instellen.

De tijdsduur van het alarm aanpassen

De standaard tijdsduur van het alarm is 30 minuten. U kunt indien u dit wenst de tijdsduur aanpassen van 1 minuut t/m 59 minuten. Om de tijdsduur aan te passen, doet u het volgende:

- Druk 6 seconden op de knop **ALARM SET (4)**. De klok toont de standaard tijdsduur van '30' minuten. Laat de knop **ALARM SET (4)** los.
- Druk op de Minutenknop (3) om de tijdsduur aan te passen op de gewenste instelling: van 1 minuut t/m 59 minuten.
- Als de display de gewenste tijdsduur van het alarm toont, zal het na 3 seconden naar de normale klokstand terugkeren. De nieuwe tijdsduur wordt de nieuwe standaard en zal in het geheugen blijven staan totdat u het weer verandert.

Het alarm uitzetten

Het alarm kan tijdelijk (voor een dag) of permanent uitgezet worden.

- 1) Wanneer het alarm afgaat, drukt u op de knop **ALARM OFF (4)**. Het alarm gaat voor deze dag uit en zal de volgende dag weer aangaan, als de alarminstelling niet veranderd wordt.
- 2) Om het alarm permanent uit te zetten schuift u de schakelaar **Alarm Aan/Uit (5)** in de **Uit** positie. Het alarm zal niet afgaan totdat u de schakelaar **Alarm Aan/Uit (5)** in de **Aan** positie hebt gezet.

Sluimerwerking

SLUIMER-knop (6) – Druk hierop nadat het alarm is afgegaan. Het alarm wordt 9 minuten uitgezet voor wat extra slaap. Na 9 minuten zal het alarm weer afgaan. U kunt dit tot 119 minuten herhalen.

De sluimertijd aanpassen

De standaard sluimertijd is 9 minuten. U kunt indien u dit wenst de sluimertijd aanpassen van 1 minuut t/m 30 minuten. Om de sluimertijd aan te passen, doet u het volgende.

- Druk 4 seconden op de knop **SNOOZE (6)**. De klok toont de standaard sluimertijd van '9' minuten. Laat de knop **SNOOZE** los.
- Druk op de **Minutenknop (3)** om de sluimertijd aan te passen op de gewenste instelling: van 1 minuut t/m 30 minuten.
- Als de display de gewenste sluimertijd toont, zal het na 3 seconden naar de normale klokstand terugkeren. De nieuwe sluimertijd wordt de nieuwe standaard en zal in het geheugen blijven staan totdat u het weer verandert.

Volume

Om het volume aan te passen draait u het **Volumewieltje (12)** totdat het gewenste niveau is bereikt.

Toon

Om de toon aan te passen draait u het **Toonwiel (10)** totdat het gewenste niveau is bereikt.

Werking van de dimmer

Er is een helderheidsbediening met vijf niveaus voor de LED display. Druk éénmaal op de knop **SNOOZE (6)** om de helderheid van de display te veranderen. De helderheid wijzigt zich in 5-4-3-2-1-2-3-4-5 (van zeer helder tot gedimd en dan van gedimd tot zeer helder).

***NB*: De dimmer werkt niet als de klok in de Sluimerstand staat.**

Bedtriller / Vibrator

- 1) Steek de steker van de bedtriller in de **Vibrator stekkerbus (14)** aan de achterzijde van de klok.
- 2) Leg de vibrator onder uw matras of kussen.

USB Oplaadpoort

Deze alarmklok heeft een handige USB oplaadpoort aan de achterkant die het mogelijk maakt diverse merken van mobiele telefoons, draagbare muziekspelers en ander apparaten met USB oplaadkabels op te laden. Het uitvoervermogen van de USB oplaadpoort is 500 mA.

Om uw apparaat op te laden steekt u de met uw draagbare apparaat geleverde USB oplaadkabel in de **USB oplaadpoort (13)** aan de achterzijde van deze alarmklok. Bekijk de oplaadindicator van uw apparaat om te controleren dat deze opgeladen wordt.

NB: De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van de oplaadstroom dat uw apparaat nodig heeft. Vandaar dat sommige apparaten meer tijd nodig hebben dan andere apparaten.

Back-up voor de batterij

Om een back-up voor de batterij te gebruiken steekt u één 9V batterij in de basis van de klok onder het **batterijdeksel (7)**. Tijdens een stroomuitval zal de LED display niets tonen maar de klok loopt nog steeds en zal de juiste tijd bijhouden totdat de voeding hersteld is.

NB: Voor het beste resultaat wordt aanbevolen de batterij elke 6-8 maanden te verwisselen. Als de klok langere tijd niet gebruikt wordt, wordt aanbevolen de batterij te verwijderen om lekkage te voorkomen.

DC 5V Voeding


Steek de steker van de DC voeding in de DC5V  IN (11) stekkerbus aan de achterkant van de klok.

ALGEMENE GEGEVENS

Voedingsadapter van laboratoria van onderwriters: AC100 - 240V~, 50/60 Hz.

Energieverbruik: Adapter uitgangsvermogen: DC5V , 800 mA.

Uitvoervermogen USB oplaadpoort: 500 mA.

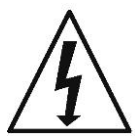	WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN MAG DE KAP (OF ACHTERKANT) NIET VAN HET PRODUCT VERWIJDERD WORDEN. ER ZITTEN GEEN ONDERDELEN IN HET APPARAAT DIE DE GEBRUIKER KAN BEDIENEN. RICHT U ZICH VOOR SERVICE TOT UW SONIC DEALER.	
De bliksemschicht en de pijlpunt in de driehoek waarschuwen u voor gevaarlijke voltages in het product.		Het uitroepteken in de driehoek waarschuwen u voor belangrijke instructies bij het product.

WAARSCHUWING:

OM HET RISICO VAN BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN MAG DIT APPARAAT NIET BLOOTGESTELD WORDEN AAN REGEN OF VOCHT.

Normaal functioneren kan verstoord worden door sterke elektromagnetische interferentie. Als dit het geval is, kan normaal functioneren hervat worden door de verbinding met de voedingsadapter te verbreken en weer te verbinden. Als het functioneren niet hervat wordt, probeer dan het apparaat naar een andere plaats te verplaatsen.

- Aandacht moet besteed worden aan de milieuaspecten van de batterijverwijdering.

-  geeft de aparte inzameling van elektrische en elektronische apparatuur aan.

SONIC ALERT'S 2-JARIGE BEPERKTE GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Sonic Alert product heeft gekocht, garandeert Sonic Alert het voor twee (2) jaar. Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Dit product wordt gedekt door de wettelijke garantie van overeenkomstigheid zoals door de van toepassing zijnde wet is bepaald.

Belangrijk: uw aankoopbewijs is onderdeel van de garantie en moet bewaard worden en getoond in het geval van een garantieclaim.

Geemarc Telecom SA

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59791 Grande-Synthe Cedex, FRANCE

RICHTLIJNEN VOOR HERGEBRUIK

De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) is opgesteld om producten die aan het einde van hun nut zijn gekomen op de beste manier te recyclen.

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet in uw huishoudelijke afvalbak.

Gebruik liever een van de volgende stortingsopties:

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container. Gooi het apparaat ook in een daartoe geschikte AEEA container.
- Of overhandig het oude product aan uw detailhandelaar. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren. Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.

CE verklaring:

Sonic Alert verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van 2004/108/EC van de Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) en, indien van toepassing, 2006/95/EC van de Laag Voltage Richtlijn (LVR).

De nakomingsverklaring kan ingezien worden op www.geemarc.com.

Gedistribueerd door :

geemarc™
Hear the Difference
FRANKRIJK

Parc de l'étoile

2 rue Galilée

59791 Grande-Synthe Cedex

www.geemarc.com

