

HearIt All



HearIt All: Een bomvol communicatiesysteem

HearIt All is een veelzijdige draadloze communicatieversterker voor mensen met gehoorverlies. Het is de eerste draadloze communicatieversterker die behoeften naar versterking combineert, bij het kijken naar televisie, het hebben van gesprekken met achtergrondgeluid en het praten via de vaste en mobiele telefoon in één product. HearIt All heeft een flexibel, gebruiksvriendelijk, krachtig en robuust ontwerp.

HearIt All: Een bomvol communicatiesysteem

HearIt All is ontworpen voor gebruikers met én zonder hoortoestellen:

- Gebruikers van hoortoestellen met een luisterspoel kunnen het gebruiken met hun hoortoestellen in de T-stand.
- Gebruikers van hoortoestellen zonder een luisterspoel en mensen die geen hoortoestel dragen kunnen het gebruiken met een hoofdtelefoon.

HearIt All kan gebruikt worden in verschillende situaties waar versterking nodig is. Het kan thuis, op het werk, op een feestje, in een auto, onderweg etc. gebruikt worden. Het versterkt het geluid van de TV of stereo-installatie, gesprekken in lawaai, maar ook gesprekken via een vaste of mobiele telefoon.

HearIt All kan handheld gebruikt worden of kan gedragen worden om de nek.



Twee draadloze technologieën worden gebruikt voor de draadloze overdracht tussen de HearIt All units; **Bluetooth®** en Wireless Digital Audio (WDA).

Voor een optimale geluids aanpassing bevat HearIt All functies voor het aanpassen van het volume en de microfoon (directioneel en omnidirectioneel).

HearIt All kan verbonden worden aan de Link AUX-adapter (optioneel). Dit maakt het mogelijk voor de gebruiker om meer dan één geluidsbron aan te sluiten en om alarmsignalen te ontvangen van de Puzzle waarschuwingszenders Detect, Detect Door en Observer wanneer de telefoon over gaat of wanneer de deurbel of babyfoon is geactiveerd.



Phonic Ear Nederland
Steenweg 17B
4181 AJ Waardenburg

tel: 0418-667040
fax: 0418-667049

info@phonicear.nl
www.phonicear.nl

Technische gegevens HearIt All Zender

Overdracht van signaal:	Wireless Digital Audio (WDA)
Frequentiebereik:	2,4 GHz
Werkbereik:	Tot 10 m
Kanalen:	16
Vertraging:	< 3ms
Max. vervorming (akoestisch):	< 0,3 %
WDA verbinding:	Naar HearIt All ontvanger
Afmetingen:	2,5 x 13 x 2 cm
Gewicht:	49 g
Bediening:	Aan/uit, directionele en omnidirectionele microfoon
Lichtindicatoren:	Aan/uit, batterij, opladen, directionele en omnidirectionele microfoon
Batterijtype:	Intern oplaadbaar
Gebruiksduur:	Ongeveer 8 uur
Oplaadtijd:	Ongeveer 6 uur
Levensduur van de batterij:	Ongeveer 1000 cycli
Materiaal:	ABS plastic
Kleur:	Zwart en grijs



Technische gegevens HearIt All Ontvanger

Overdracht van signaal:	Bluetooth® en Wireless Digital Audio (WDA)
Frequentiebereik:	2,4 GHz
Werkbereik:	Tot 10 m
Kanalen:	16 (WDA)
Max. versterking (akoestisch):	56 dB (microfoon)
Max. vervorming (lijningang):	0,75 %
Bluetooth® verbindingen:	Naar HearIt All oplaadstation Naar mobiele telefoon
WDA verbinding:	Naar HearIt All zender
Impedantie van hoofdtelefoon/neklus:	16/32 Ω
Lichtindicatoren:	WDA, Bluetooth®, batterij, aan/uit, volume en opladen
Afmetingen:	4,9 x 6,8 x 1,9 cm (zonder nekclus)
Gewicht:	71 g
Bediening:	Aan/uit, volume en beantwoordknop
Uitgang:	3,5 mm stereo jack (100 Hz - 20 kHz) Neklus (100 Hz - 5 kHz)
Batterijtype:	Intern oplaadbaar
Gebruiksduur:	TV Telefoon Stand-by
	12 uur 15 uur 24 uur
Oplaadtijd:	Ongeveer 6 uur
Levensduur van de batterij:	Ongeveer 1000 cycli
Materiaal:	ABS plastic
Kleur:	Zwart en grijs



Technische gegevens HearIt All Oplaadstation

Overdracht:	Bluetooth®
Voeding:	6 V, 1 A
Indicatielampjes:	Bluetooth® status, opladen en stroom
Bluetooth® verbinding:	Naar HearIt All ontvanger
Andere verbindingen:	PSTN telefoon in/uit, AUX input en DC in
Afmetingen:	10,8 x 4 x 7,5 cm
Gewicht:	92 g
Bediening:	WDA kanaalkiezer, WDA kanaal upload en Bluetooth® paren
Materiaal:	ABS plastic
Kleur:	Zwart en grijs



Accessoires




Extra voeding
EU 890-60-270-00



Hoofdtelefoon
890-88-629-00



Halssnoer
890-52-270-00

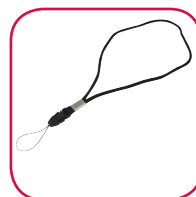

Polskoord
890-52-271-00



Telefoonsnoer
890-88-285-00



Phono naar
3,5 mm stereo jack



3,5 mm stereo jack naar
3,5 mm stereo jack



SCART naar
phono



6,3 mm stereo jack naar
3,5 mm stereo jack


Connector set
890-60-031-00



Y-snoer voor
opladen
890-60-273-00



Schroevendraaier
825-88-010-00

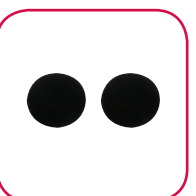

Oorpads
890-88-395-00



Scart box
890-60-033-00



Link AUX-adapter
200-02-250-00

